


Aparatura skleněná ARACHNO™ pro paralelní syntézu

Revoluční aparatura, která šetří čas, peníze a místo v laboratoři

- Použití aparatury je intuitivní a hlavně velmi efektivní - umožňuje paralelní syntézu až v 6 baňkách za stejných či velmi podobných podmínek
- Základem aparatury je 6ramenný rozbočovač ARACHNO Classic (tzv. pavouk) se zábrusy a délkou nožiček 4 nebo 13 cm
- Delší nožky slouží jako vzduchový chladič, ostatní modely mají nožky standardně dlouhé 4 cm
- Propracovanější verze ARACHNO Screw je opatřena šroubovacími uzávěry pro připojení těžších baněk nebo chladičů
- ARACHNO Screw nabízí také 3ramenný model pro připojení větších a těžších baněk (250 ml) a verzi s teflonovými kohouty
- Verze ARACHNO Sphere byla vyvinuta pro paralelní syntézu za sníženého tlaku (má speciální zábrusy), a je také k dostání ve verzi s teflonovými kohouty
- K aparatuře ARACHNO můžete připojit běžné 50ml laboratorní baňky nebo si pořídit Upgrade pro ARACHNO s veškerou výbavou pohromadě - 50ml baňky, zátky, magnetická míchadla
- ARACHNO Screw lze dále rozšířit upgradem o zpětné chladiče
- ARACHNO je vhodné do laboratoří organické chemie a vývoje léčiv, farmaceutického a potravinového průmyslu, školních, univerzitních a vědeckých laboratoří, biotechnologických a nanotechnologických laboratoří



Aparatura pro paralelní syntézu sestava ARACHNO Screw #1

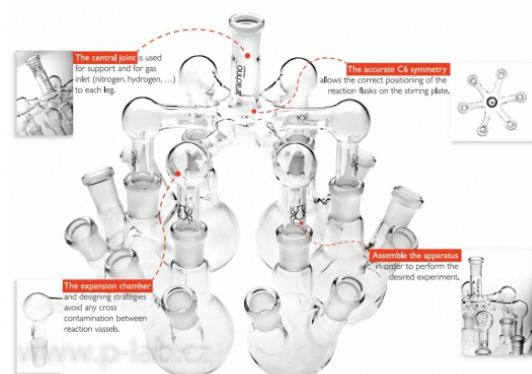

Aparatura pro paralelní syntézu - schéma




ARACHNO Classic 6XSR



ARACHNO Classic 6XLR



ARACHNO Screw 6XSR

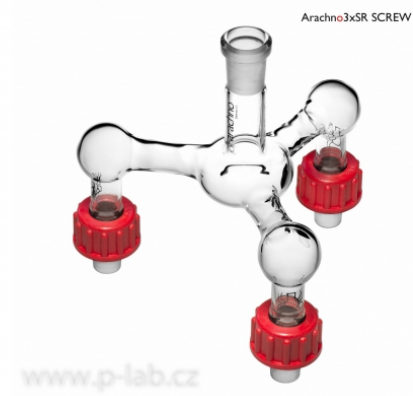

ARACHNO Screw 3XSR



ARACHNO Screw 6XST




ARACHNO Sphere 6XST



ARACHNO Sphere 6XST



Sestava ARACHNO Screw #1

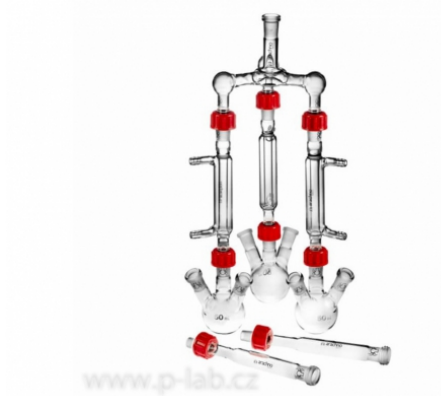

Sestava ARACHNO se zpětnými chladiči



ARACHNO v krabičce

Model	Popis	Zábrusy	Rozměry (š x h x d) mm	Katalogové číslo
ARACHNO Classic 6XSR	Základní 6ramenný rozbočovač s délkou nožek 4 mm	14/23	150 x 150 x 150	X010111

ARACHNO Classic 6XLR	Základní 6ramenný rozbočovač s délkou nožek 13 cm	14/23	150 x 150 x 280	X010112
ARACHNO Screw 6XSR	6ramenný rozbočovač se šroubovacími uzávěry	14/23	150 x 150 x 150	X010114
ARACHNO Screw 3XSR	3ramenný rozbočovač se šroubovacími uzávěry	14/23	150 x 150 x 150	X010119
ARACHNO Screw 6XST	6ramenný rozbočovač se šroubovacími uzávěry a kohouty	14/23	150 x 150 x 150	X010123
ARACHNO Sphere 6XSR	6ramenný rozbočovač pro paralelní syntézu za sníženého tlaku	GSF19/9	150 x 150 x 150	X010124
ARACHNO Sphere 6XST	6ramenný rozbočovač pro paralelní syntézu za sníženého tlaku s kohouty	GSF19/9	150 x 150 x 150	X010177
Upgrade ARACHNO Classic #1	šest 2hrdlých 50ml baněk, 6 zátek, 6 oválných magnetických míchadel délky 20 mm	šest 2hrdlých 50ml baněk, 6 zátek, 6 oválných magnetických míchadel délky 20 mm	šest 2hrdlých 50ml baněk, 6 zátek, 6 oválných magnetických míchadel délky 20 mm	X010113
Upgrade ARACHNO Classic #2	šest 3hrdlých 50ml baněk, 12 zátek, 6 oválných magnetických míchadel délky 20 mm	šest 3hrdlých 50ml baněk, 12 zátek, 6 oválných magnetických míchadel délky 20 mm	šest 3hrdlých 50ml baněk, 12 zátek, 6 oválných magnetických míchadel délky 20 mm	X010115
Upgrade ARACHNO Screw #1	šest 3hrdlých 50ml baněk, 12 zátek, 6 oválných magnetických míchadel délky 20 mm	šest 3hrdlých 50ml baněk, 12 zátek, 6 oválných magnetických míchadel délky 20 mm	šest 3hrdlých 50ml baněk, 12 zátek, 6 oválných magnetických míchadel délky 20 mm	X010116
Upgrade ARACHNO Screw #2	šest 2hrdlých 50ml baněk, 6 zátek, 6 oválných magnetických míchadel délky 20 mm	šest 2hrdlých 50ml baněk, 6 zátek, 6 oválných magnetických míchadel délky 20 mm	šest 2hrdlých 50ml baněk, 6 zátek, 6 oválných magnetických míchadel délky 20 mm	X010166
Upgrade ARACHNO Screw - refluxní kit	3 vodní chladiče, 3 vzduchové chladiče	3 vodní chladiče, 3 vzduchové chladiče	3 vodní chladiče, 3 vzduchové chladiče	X010117