

BLASTICIDIN

Nukleosidové antibiotikum, Blastacidin S hydrochlorid


CAS: 3513-03-9

Vzorec: $C_{17}H_{26}N_8O_5 \cdot HCl$

- Inhibuje biosyntézu proteinů v prokaryotech i eukaryotech blokadou tvorby peptidové vazby.
- Selekční marker pro buňky transfektované *brs* či *BSD* rezistentními geny.

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	458,90
Zásobní roztok:	50 mg/ml ve vodě, PBS či HEPES, skladujte při -20 °C
Pracovní roztok:	3-100 µg/ml
Bezpeč. věty (GHS):	H300
Teplota skladování:	+4 °C

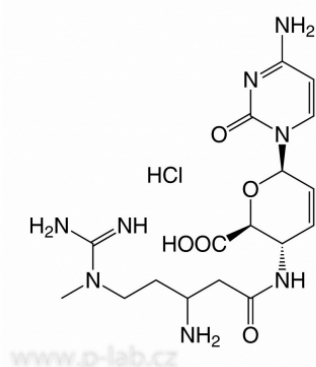

Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
min 98 %, pro biochemii	10 mg	plast	R.CP14.1
min 98 %, pro biochemii	25 mg	plast	R.CP14.2
min 98 %, pro biochemii	50 mg	plast	R.CP14.3
min 98 %, pro biochemii	100 mg	plast	R.CP14.4