


Destička mikrotitrační inertGrade™ s víčkem | BRAND

96jamková sterilní destička s optimalizovaným povrchem pro kultivaci suspenzních buněčných kultur

- Upravený povrch redukuje buněčnou adhezi a absorpci proteinů
- Minimalizuje enzymovou a buněčnou aktivitu a inhibuje rannou diferenciaci kmenových buněk
- Díky nebiologickému způsobu modifikace povrchu může být destička uchovávána 3 roky při laboratorní teplotě
- Destičky se standardním oranžovým alfanumerickým popisem jamek pro jednoznačnou identifikaci každé jamky
- Necytotoxické destičky bez DNA, DNáz, RNáz a endotoxinů, sterilizované etylenoxidem
- Destičky s kulatým (U profil), kónickým (V profil), plochým (F profil), nebo zaobleným (C profil) tvarem dna jamek
- Zaoblený tvar dna (C profil) spojuje výhody plochého a kulatého dna - zaoblené okraje zlepšují promíchávání obsahu jamky, plochá část dna umožňuje přesné optické měření
- Destičky se zaobleným tvarem dna jsou ideální pro imunoeseje, ve kterých optické měření a intenzivní míchání jsou klíčové faktory ovlivňující přesnost testovaných výsledků

Technické parametry

Materiál:	hydrofobní, chemicky upravený čirý, bílý nebo černý PS
Balení standardních destiček:	40 ks jednotlivě balené s víčkem
Balení destiček s čirým dnem:	5 ks v balení nebo 40 ks jednotlivě balené s víčkem

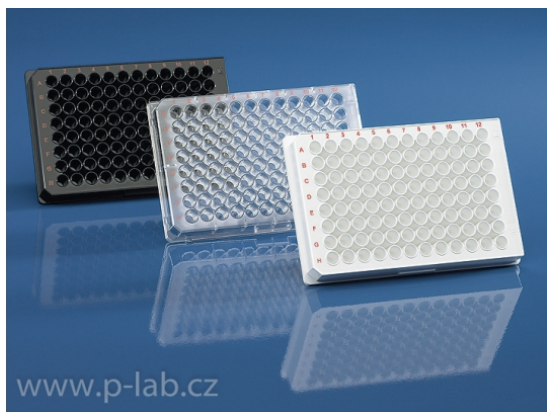

Destička mikrotitrační inertGrade™ s víčkem

Typ destičky	Barva destiček	Tvar dna	Objem jamky (μl)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Standardní	čirá	kulatý U	330	40	P781900
Standardní	čirá	plochý F	350	40	P781902
Standardní	bílá	kulatý U	330	40	P781904
Standardní	bílá	plochý F	350	40	P781905
Standardní	bílá	zaoblený C	350	40	P781906
Standardní	černá	kulatý U	330	40	P781907
Standardní	černá	plochý F	350	40	P781908
Standardní	černá	zaoblený C	350	40	P781909
Číré dno	bílá	plochý F	330	5	P781912

Číré dno	bílá	plochý F	330	40	P781910
Číré dno	černá	plochý F	330	5	P781913
Číré dno	černá	plochý F	330	40	P781911