

Exsikátor skříňový SECADOR 2.0 a 2.0 A | BEL-ART

Střední 33litrový stohovatelný exsikátor s políčkami a vestavěným vlhkoměrem

- Průhledná skříň umožňuje snadnou kontrolu uloženého materiálu
- Patentovaná vzduchotěsná konstrukce zabraňuje průniku vlhkosti a prachu
- Odolný proti vzniku skvrn a popraskání
- Stěny čirého nebo modrého exsikátoru odstíní 99 % UV zářením, oranžově probarvené navíc min 50 % viditelného světla
- Standardní model je určen pro použití libovolného sušicího prostředku
- Automatický model A udržuje vlhkost okolo 25 % pomocí zabudované automatické sušící jednotky
- Sušící jednotka používá 2 větráky pro zajištění stálého proudění vzduchu a odvětrání vlhkosti
- Model s ventily má na zadní stěně vstupní a výstupní ventil pro práci v umělé atmosféře
- POZOR! Model s ventily nelze použít pro sušení za sníženého tlaku

Technické parametry


Materiál skříně:	kopolyester, vynikající chemická odolnost
Materiál políček :	čirý polystyren s otvory pro maximální cirkulaci vzduchu
Materiál/náplň sušící jednotky (modely A):	polykarbonát/silikagel
Objem:	33 l
Rozměry (š × h × v):	414 × 341 × 315 mm
Počet políček:	2
Vzdálenost mezi políčkami :	95 mm
Čas potřebný ke snížení RH z 75 % na < 25 % (modely A):	cca 8 hodin
Počet zámků:	2
Interval automatické regenerace náplně ohřevem (modely A):	20 minut
Napájení sušící jednotky (modely A):	220 V



SECADOR 2.0 čirý



SECADOR 2.0 A čirý

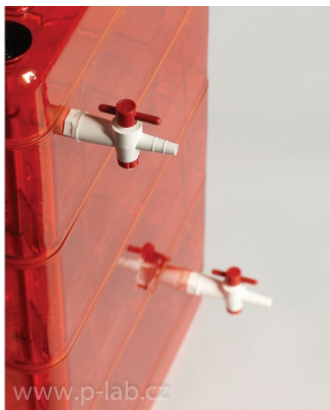

Ventily na zadní stěně exsikátoru

Model	Barva	Katalogové číslo
Standardní 2.0	čirá	A720000
Standardní 2.0	oranžová	A720008
Automatický 2.0 A	čirá	A720220
Automatický 2.0 A	oranžová	A720228
Standardní 2.0 s ventily	čirá	A720002
Standardní 2.0 s ventily	oranžová	A720009