

Inkubátor | MEMMERT

Laboratorní inkubátor s 1 nebo 2 displeji - možnost týdenního programování průběhu v reálném čase

- Konvekční proudění s digitální regulací množství přísávaného přehřátého vzduchu s krokem 10%
- Regulace teploty optimalizovaná pro teploty okolo 37 °C
- Digitální nastavení teploty a času pomocí dotykového TFT displeje a otočného tlačítka
- Snadné otvírání dveří pomocí svislého madla, topné okruhy integrované ve čtyřech vnitřních stěnách
- Vnitřní paměť s kapacitou pro údaje minimálně za posledních 10 let
- Vnitřní a vnější plášť skříňe ze strukturované nerez oceli, zadní kryt z pozinkované oceli, skleněné vnitřní dveře
- Dvě varianty ovládání - "SingleDISPLAY" a "TwinDISPLAY"
- Funkce "SetpointWAIT" zajišťující spuštění programu teprve po dosažení nastavené teploty
- Software "AtmoCONTROL" standardně pro modely s ovládáním "TwinDISPLAY"


Technické parametry

Regulace "SingleDISPLAY":	uživatelsky nastavitelná elektronická a automatická mechanická ochrana proti přehřátí rozhraní ETHERNET, 1 teploměr Pt100 třídy A
Regulace "TwinDISPLAY":	vícenásobná ochrana proti přehřátí se zvukovým a vizuálním alarmem funkce "HeatBALANCE" zajišťující rovnoměrné rozložení teploty při jakémkoliv naplnění komory týdenní programování průběhu v reálném čase (začátek a konec ohřevu, prodleva, chlazení, 10 000 hodnot, 1 týden) průběh zobrazován graficky na displeji sterilizační program (160 °C po dobu 4 hod) rozhraní ETHERNET a USB, 2 teploměry Pt100 třídy A
Teplotní rozsah:	+20 až 80 °C, minimálně 5 °C nad teplotou místnosti
Rozlišení displeje :	0,1 °C

Model	30	55	75	110
Objem	32 l	53 l	74 l	108 l
Rozměry vnitřní (š x h x v)	400 x 250 x 320 mm	400 x 330 x 400 mm	400 x 330 x 560 mm	560 x 400 x 480 mm
Počet poloh	3	4	6	5
Podlážky	1	1	2	2
Příkon	0,8 kW	1,0 kW	1,25 kW	1,4 kW
Rozměry vnější (š x h x v)	585 x 434 x 707 mm	585 x 514 x 787 mm	585 x 514 x 947 mm	745 x 584 x 867 mm
Hmotnost	48 kg	57 kg	66 kg	76 kg



Inkubátor IN30

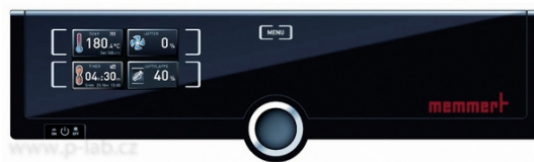

"SingleDISPLAY"



Inkubátor IN55



"TwinDISPLAY"



Inkubátor IN75



Inkubátor IN110



Inkubátor IN30plus



Inkubátor IN55plus



Inkubátor IN75plus



Inkubátor IN110plus

Regulace "SingleDISPLAY"		Regulace "TwinDISPLAY"	
Model	Katalogové číslo	Model	Katalogové číslo
IN30	M093041	IN30plus	M093841
IN55	M093141	IN55plus	M093941
IN75	M093241	IN75plus	M094041
IN110	M093341	IN110plus	M094141

Větší modely objemů 161, 256, 449, 749 l na vyžádání, lze objednat i modely s nuceným oběhem vzduchu