


Kit pro extrakci DNA fragmentů Ultrafree®-DA gel extraction kit

Pro jednokrokovou extrakci DNA fragmentů z agarózových a polyakrylamidových gelů

- Snadná aplikace, jednokroková extrakce do 10 minut
- Účinná absorpce DNA pomocí silikagelové membrány poskytuje získání spolehlivě vysokého množství DNA
- V průběhu centrifugace dochází k nebulizaci gelu a k následné filtraci a purifikaci DNA
- Vhodný pro fragmenty o velikosti 100 bp až 10 000 bp
- Ideální také pro značenou DNA, např. po fluorescenčním nebo radioaktivním značení

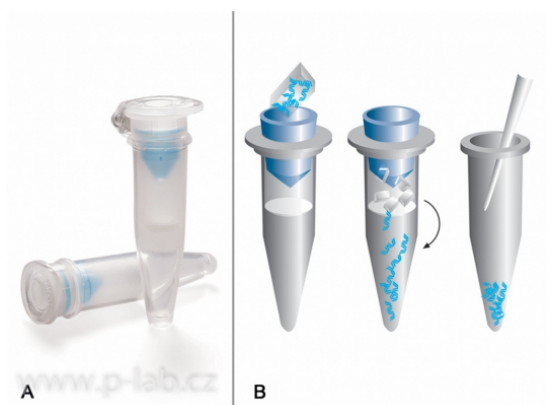

Ultrafree-DA kit pro extrakci DNA fragmentů



Ultrafree-DA kit pro extrakci DNA fragmentů

Popis	Balení	Katalogové číslo
Ultrafree-DA kit pro extrakci DNA fragmentů	50 izolací	R.AE86.1

Kit obsahuje: 1,5ml extrakční mikrozskumavku s vyjímatelným nebulizačním filtrem