

Lázně vodní nemíchané digitální WTB | MEMMERT

Digitální vodní lázně se šikmým nebo plochým víkem

- Vana i plášť z vysoce kvalitní, korozivzdorná nerez oceli, vana bez rohů a hran pro snadné čištění
- Intuitivní 3,5 " barevný grafický displej s dotykovou obrazovkou pro snadné nastavování teploty a času
- Uživatelsky přívětivé menu, vlastní 2bodová kalibrace
- Topný systém chráněný proti korozi mimo vlastní pracovní prostor
- Nezávislý omezovač teploty pro vypnutí topení v případě poruchy
- Vizuální a akustický alarm překročení individuálně nastavené teploty
- Digitální integrovaný časový spínač od 1 min do 99 hod 59 min
- Ventil pro vypouštění kapaliny z vany bez nutnosti ji naklánět
- 6 velikostních modelů o objemu 7 až 51 litrů ve verzi se šikmým víkem nebo plochým víkem s otvory
- Přídavné třepací zařízení umožňuje použít lázeň pro reciproké třepání baněk a stojánek se zkumavkami
- Model s externím čerpadlem zajišťujícím nepřetržitou cirkulaci média pro maximální teplotní homogenitu v celém objemu lázně

Technické parametry

Teplota :	teplota okolí +5 až 100 °C
Nastavitelný rozsah teplot :	+10 až 100 °C, po 0,1 °C
Teplotní stabilita/homogenita:	+mn0,1 °C/+mn0,25 °C
Tepelná ochrana :	pevně nastavený tepelný vypínač
Časový spínač:	1 min až 99 hod 59 min

Model	Objem	Vnitřní rozměry (š x h x v)	Vnější rozměry (š x h x v)	Min. výška hladiny	Příkon	Hmotnost
WTB6	7 l	277 x 217 x 150 mm	349 x 289 x 328 mm	40 mm	1 000 W	6 kg
WTB11	10 l	267 x 207 x 200 mm	349 x 289 x 378 mm	40 mm	1 000 W	7 kg
WTB15	17 l	482 x 277 x 150 mm	554 x 349 x 328 mm	20 mm	1 420 W	9 kg
WTB24	23 l	472 x 267 x 200 mm	554 x 349 x 378 mm	20 mm	1 420 W	10 kg
WTB35	37 l	602 x 482 x 150 mm	679 x 554 x 328 mm	20 mm	2 800 W	14 kg
WTB50	51 l	592 x 472 x 200 mm	679 x 554 x 378 mm	20 mm	2 800 W	16 kg



Lázeň se šikmým víkem

Vodní lázně s odklápěcím víkem

- Při teplotách nad 60 °C zabraňuje šikmé víko nadbytečnému odpařování vody z lázně

Model	Objem (l)	Katalogové číslo
WTB6	7	R.1EYA.1
WTB11	10	R.1EYC.1
WTB15	17	R.1EYE.1
WTB24	23	R.1EYH.1
WTB35	37	R.1EYK.1
WTB50	51	R.1EYL.1

Lázně dodáváme komplet se šikmým krytem a návodem.



Lázeň WTB6 se šikmým víkem



Lázeň WTB11 se šikmým víkem



Lázeň WTB15 se šikmým víkem



Lázeň WTB24 se šikmým víkem



Lázen WTB35 se šikmým víkem



Lázen WTB50 se šikmým víkem

Rošt pro vodní lázně se šikmým víkem

Oboustranně použitelný rošt pro zvýšení dna vodní lázně


Technické parametry

Výška roštu: 30 nebo 60 mm

Materiál: nerezový plech

Rošt pro lázeň	Katalogové číslo
WTB6 a WTB11	R.1EYN.1
WTB15 a WTB24	R.1EYP.1
WTB35 a WTB50	R.1EYT.1

Nerezové stojánky do vodních lázní MEMMERT jsou k dispozici na doptání

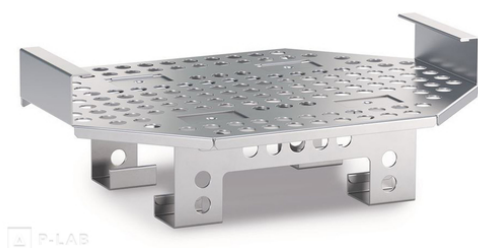

Rošt pro lázně WTB6 a WTB11



Rošt pro lázně WTB15 a WTB24



P-LAB

Rošt pro lázně WTB35 a WTB50

Lázeň s plochým víkem s otvory

Vodní lázně s otvory ve víku se sadou kroužků

- Otvory ve víku lázní se sadou kroužků pro zakrytí volného prostoru okolo hrdla nádoby
- Rozměry a technické parametry jsou stejné jako u lázní se sedlovým víkem

Model	Objem (l)	Počet otvorů	Max. průměr otvoru (mm)	Průměry kroužků (mm)	Katalogové číslo
WTB6	7	3	87	65, 45, 25	R.1EXX.1
WTB11	10	3	87	65, 45, 25	R.1EXY.1
WTB15	17	6	107	85, 65, 45, 25	R.1EY0.1
WTB24	23	6	107	85, 65, 45, 25	R.1EY1.1
WTB35	37	8	107	85, 65, 45, 25	R.1EY2.1
WTB50	51	8	107	85, 65, 45, 25	R.1EY3.1

Lázně dodáváme komplet s plochým krytem se sadami prstenů a návodem.



P-LAB

Lázeň WTB6 bez víka



P-LAB

Lázeň WTB11 bez víka



Lázeň WTB15 bez víka



Lázeň WTB24 bez víka



Lázeň WTB35 bez víka



Lázeň WTB50 bez víka



Víko s otvory pro lázně WTB6 a WTB11



Víko s otvory pro lázně WTB15 a WTB24



Víko s otvory pro lázně WTB35 a WTB50

Lázeň s třepacím mechanismem

Standardní vodní lázně s vloženým mechanismem umožňujícím reciproké třepání

- Na nosný rám třepacího mechanismu lze uchytit stojánky na zkumavky nebo závěs s perforovanou policí pro uchycení klem na baňky
- Rozměry a technické parametry lázně jsou stejné jako u lázní se sedlovým víkem

Technické parametry

Rychlost třepání :	35 až 160 kyvů/min
Výkyv:	15 mm

Model	Objem (l)	Katalogové číslo
WTB15	17	R.1EYX.1
WTB24	23	R.1EYY.1
WTB35	37	R.1H00.1
WTB50	51	R.1H01.1

Lázně dodáváme se šikmým víkem a třepacím zařízením s nosným rámem, závěsem s perforovanou montážní policí pro uchycení klem na baňky (vhodné klemy je nutno objednat samostatně) a návodem.

Nerezové stojánky do vodních lázní MEMMERT jsou k dispozici na doptání, pro jejich použití je nutno závěs s perforovanou policí odstranit.



Lázeň WTB s třepacím mechanismem

Příslušenství pro třepací mechanismus

Pérové klemy pro uchycení baněk na perforovanou polici nosiče třepacího rámu

Popis	Katalogové číslo
Klema pro 100 ml baňky (max. 18)	M734011
Klema pro 200 ml baňky (max. 14)	M734012
Klema pro 300 ml baňky (max.14)	M734013
Klema pro 500 ml baňky (max. 8)	M734014



Klema pro 100 ml baňky



Klema pro 200 ml baňky



Klema pro 300 ml baňky



Klema pro 500 ml baňky

Lázeň s čerpadlem

Lázně se šikmým víkem a externím čerpadlem pro nepřetržitou cirkulaci média v lázni

- Externí čerpadlo zajišťuje maximální teplotní homogenitu celého objemu temperovaného media
- Čerpadlo lze zapnout a vypnout
- Rozměry a technické parametry jsou stejné jako u lázní se sedlovým víkem

Model	Objem (l)	Katalogové číslo
WTB6	7	R.1EY4.1
WTB11	10	R.1EY5.1
WTB15	17	R.1EY6.1
WTB24	23	R.1EY7.1
WTB35	37	R.1EY8.1

WTB50	51	R.1EY9.1
-------	----	----------

Lázně dodáváme se šikmým víkem, externí čerpací jednotkou, instalační a připojovací sadou a návodem.



Lázaň WTB15 s čerpadlem