


Míchačka magnetická vícemístná bez topení | VELP

Analogové a digitální modely míchaček pro dlouhodobé současné míchání 6 a 15 nádobek

- Analogové nebo digitální nastavení rychlosti míchání s přesnou elektronickou regulací i při nízkých otáčkách
- Digitální modely s displejem pro nastavení otáček s krokem 10 ot./min, časovým spínačem a možností změny směru míchání
- Systém SpeedServo™ u digitálních modelů zaručuje konstantní otáčky i při změně zátěže
- Pevná konstrukce z ocelového plechu krytého světlým epoxidovým lakem, horní deska z nerezové oceli
- Pomalý start zabraňuje utržení magnetického míchadla s následným rychlým dosažením nastavených otáček
- Během míchání nedochází k ohřevu pracovní plochy ani po několikadenním míchání - ideální pro mikrobiologii a biochemii
- Prodloužená záruka 3 roky - stačí, když zakoupenou míchačku zaregistrujete do 60 dnů [na stránkách výrobce >>>](#)

Technické parametry

Model	MULTISTIRRER 6	MULTISTIRRER 15	MULTISTIRRER Digital 6	MULTISTIRRER Digital 15
Maximální míchaný objem	6 x 400 ml	15 x 250 ml	6 x 400 ml	15 x 250 ml
Maximální Ø nádobky	85 mm	64 mm	85 mm	64 mm
Otáčky	50 až 850 ot./min	50 až 850 ot./min	80 až 1 500 ot./min	80 až 1 500 ot./min
Vzdálenost mezi středy míchaných míst	100 mm	74 mm	100 mm	74 mm
Časový spínač	-	-	1 až 900 min, nebo kontinuálně	1 až 900 min, nebo kontinuálně
Reverzní míchání	-	-	5 až 900 vteřin	5 až 900 vteřin
Výkon	3,6 W	9 W	3,6 W	9 W
Napájení	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz
Rozměry (š x h x v)	230 x 370 x 51,5 mm	230 x 370 x 51,5 mm	230 x 370 x 51,5 mm	230 x 370 x 51,5 mm
Hmotnost	1,75 kg	2,1 kg	1,75 kg	2,1 kg

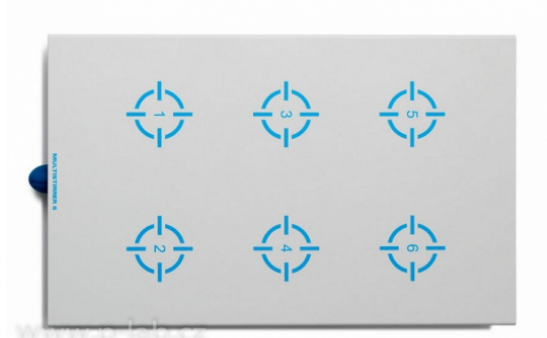


Analogová míchačka MULTISTIRRER 6



Analogová míchačka MULTISTIRRER 6



Analogová míchačka MULTISTIRRER 15

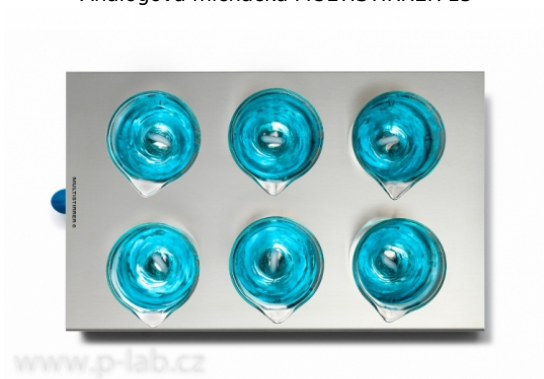


Digitální míchačka MULTISTIRRER Digital 6



Digitální míchačka MULTISTIRRER Digital 6



Digitální míchačka MULTISTIRRER Digital 15

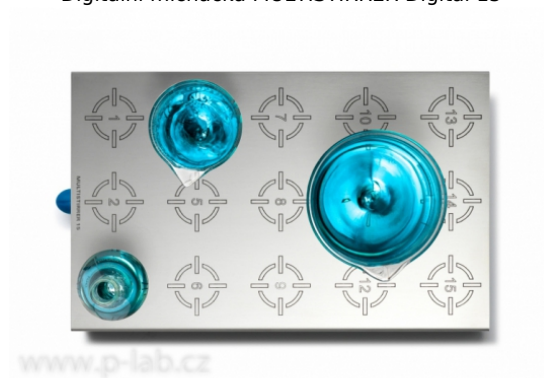

Digitální míchačka MULTISTIRRER Digital 15

Digitální míchačka MULTISTIRRER Digital 15

Model	Maximální kapacita	Katalogové číslo
MULTISTIRRER 6	6 x 400 ml	X203177
MULTISTIRRER 15	15 x 250 ml	X203178
MULTISTIRRER Digital 6	6 x 400 ml	X203179
MULTISTIRRER Digital 15	15 x 250 ml	X203180