

PCR destička UltraFlux® bez rámečku se zvýšeným okrajem jamek | SSI

24, 48 a 96jamková "Unskirted" standardní 0,35ml destička

- Univerzální destička použitelná ve většině PCR cyclerů pro standardní PCR a "real-time" qPCR
- 24 a 48jamkové destičky pro PCR reakci s malým počtem vzorků
- Komínkově zvýšený okraj jamek pro omezení rizika vzájemné kontaminace vzorků
- Destička je uzavíratelná fólií nebo opakovaně použitelným pružným víčkem
- Stejněměrně tenká stěna zaručuje maximální, rychlý a rovnoměrný přenos tepla
- Neprůhledné stěny jamek bílé destičky zajišťují vysokou kvalitu a homogenitu fluorescenčního signálu
- Zmenšený objem jamek "low profile" destičky redukuje mrtvý objem a zvyšuje efektivitu PCR reakce
- Výrazný černý alfanumerický popis jamek a uříznutý roh pro snadnou orientaci

Technické parametry


Materiál:	medicinálně čistý PP odpovídající požadavkům FDA
Materiál bílých destiček:	medicinálně čistý PP probarvený oxidem titaničitým
Objem jamek:	cca 350 µl



typ 3410



typ 3411

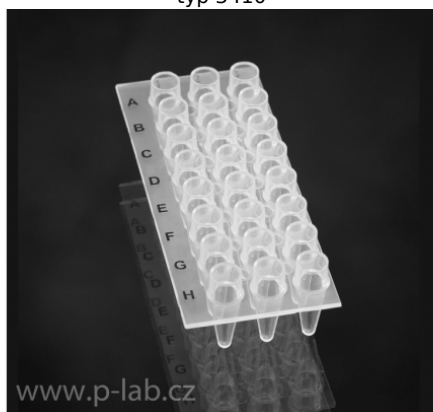

typ 3412

Typ destičky	Typ jamek	Počet jamek	Barva	Uříznutý roh	Balení (ks)	Katalogové číslo
3412	Standardní	24	čirá	H12	20 x 2	U341200
3411	Standardní	48	čirá	H12	10 x 2	U341100
3410	Standardní	96	čirá	H12	5 x 2	U341000.N

