

Pipeta na ředění ACURA 810 | SOCOREX

Manuální pipeta pro ředění v poměru 1:10 používající plastové kapiláry

- Dva fixně nakalibrované objemy s možností individuální rekaliibrace
- Při nasátí 1,1 ml vzorku dávkuje ve dvou samostatných krocích 1,0 a 0,1 ml
- Plně autoklárovatelné v sestaveném stavu, bez nutnosti rekaliibrace
- Nastavitelná poloha vyhazovače plastových kapilár
- Polyethylenový filtr brání kontaminaci vnitřních částí pipety

Technické parametry

Rozměry PP kapilár:	délka 190 mm, průměr 4 mm
Balení PP kapilár:	40 x 25 ks
Balení PE filtrů:	100 ks

Reprodukovatelnost pro objem 1 ml	Reprodukovatelnost pro objem 0,1 ml	Přesnost pro objem 1 ml	Přesnost pro objem 0,1 ml
< ±0,5 %	< ±2,0 %	< 0,4 %	< ±2,5 %




Pipeta na ředění ACURA 810



Kapiláry

PE ochranné filtry

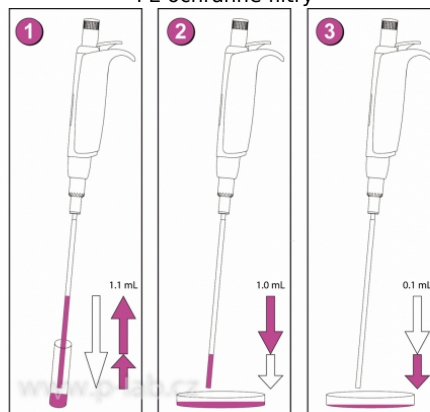

Ukázka práce



Stojan



Vyhazovač špiček a nastavení jeho pozice



Pipeta na ředění ACURA 810



Detail těla pipety

Popis	Katalogové číslo
Pipeta na ředění Acura model 810	S810110
Polypropylenové kapiláry	S313110
PE ochranné filtry	S322810