

Pipetovací nástavec Pipetus | HIRSCHMANN

Tři modely nástavce pro bezpečné a pohodlné pipetování klasickými pipetami

- Univerzální silikonový adaptér pro skleněné i plastové pipety od 0,1 do 200 ml
- Regulace rychlosti nasávání a vypouštění tlakem na ovládací knoflíky
- Membránový PTFE filtr 0,2 µm a bezpečnostní zpětný ventil v hlavě Pipetusu
- Nástavec lze sterilizovat při 121°C (mimo PTFE filtru)

Technické parametry

Pipetus Akku :	Pipetovací nástavec se zabudovanou pumpičkou na akumulátorový pohon. Provozní doba na jedno nabití až 50 hod. Pět nastavitelných rychlostí nasávání a vyfukování. Přepínací tlačítko pro vyfouknutí nebo samovolný výtok nasáté kapaliny. Kontrola všech funkcí na barevném displeji. Dodává se včetně nabíječky a nabíjecího stojánu.
Pipetus Standard Filter :	Provedení Standard se speciálním filtrem na sacím přívodu do pumpičky.
Pipetus Junior:	Jednoduchá mechanická bezmotorová verze. Identická ruční část s ovládacími ventily a s adaptérem na pipety. Na jedno stisknutí nasávacího ventilu nasaje cca 2 ml roztoku. Výtok závislý na intenzitě stisku vypouštěcího tlačítka. Tlačítko na vyfouknutí.

Model	Velikost pipet	Hmotnost
Akku	0,1 - 200 ml	240 g
Standard Filter	0,1 - 200 ml	130 g
Junior	doporučený rozsah 0,5 - 25,0 ml	130 g



Pipetovací nástavec Pipetus




Nástavec pipetovací Pipetus JUNIOR

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Pipetus Akku včetně nabíječky a stojánu	1	H907000
Pipetus Standard Filter	1	H904000
Pipetus Junior	1	H902000

Příslušenství a náhradní díly

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
1 - Držák pipety - komplet	1	H903800
2 - PTFE membránový filtr pro model Standard, Akku a Junior	5	H903704
3 - Zpětný ventil	1	H903202
4 - Silikonový adaptér pro pipety	1	H903201
5 - Kryt držáku pipety	1	H903803
6 - Přidržovací matka	1	H903802
Filtr pro pumpičku modelu Standard	1	H903701
Stojánek pro postavení na stůl	1	H905700

Uvedené náhradní díly jsou určeny pro novou generaci nástavců Pipetus Akku a Pipetus Standard. Nabídku na náhradní díly pro staré modely těchto pipetovacích nástavců (jejich sedmimístné výrobní číslo začíná číslicí 1) a na modely Pipetus Junior vám zašleme na vyžádání.

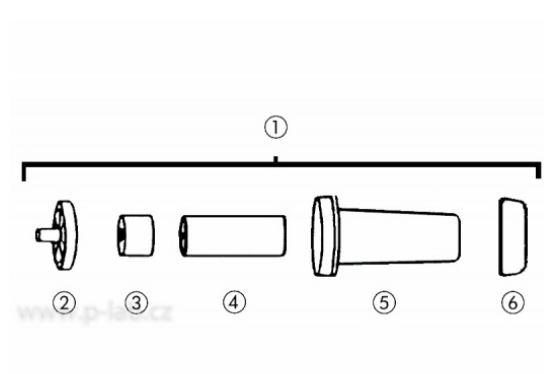

1 - Držák pipety - komplet