


Popisovač autoradiografický

Popisovač s fosforovým inkoustem

- Pro popis papíru, folií a suchých polyakrylamidových gelů při chemolumiscenčních nebo autoradiografických metodách
- Inkoust aktivovaný před expozicí světlem v místnosti osvětlení X-ray film a zobrazí se jako černé písmo
- Použitelný pro krátkodobou i dlouhodobou expozici díky 2-3 minutovému poločasu efektu
- Snadné označení detailů díky tenkému hrotu popisovače
- Výměnné hroty umožňují použít popisovač i po několikaměsíční přestávce nebo po vyschnutí hrotu

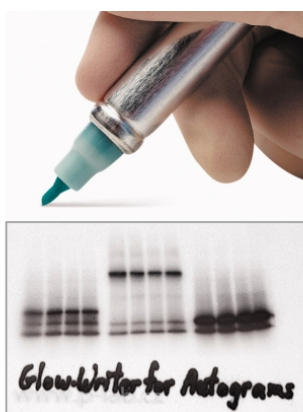

Popisovač autoradiografický

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Autoradiografický popisovač	1	I321021
Náhradní hroty	4	I321121

S popisovačem dodáváme 4 ks náhradních hrotů