

**Semimikrováhy Secura® | SARTORIUS**

Precizní ověřené semimikrováhy pro laboratorní vážení s rozlišením 0,01 mg

- Interní, plně automatická, teplotně a časově kontrolovaná "isoCAL" kalibrace
- Volitelně 20 mezinárodních váhových jednotek a 13 různých jazyků menu
- Velký dotykový grafický displej s funkcí SmartTouch a Start Asistent pro snadné ovládání s jednoduchou navigací v menu
- Počítání částic, maximální hodnota, procentuální vážení, kontrolní vážení, hustota, vážení za nestabilních podmínek
- Speciální laboratorní aplikace - míchání, podíl komponent, konverze, statistika
- Ochranný skleněný kryt proti průvanu, kulatá nerezová vázní miska
- Odnímatelný ochranný kryt a vyjímatelná, originálně konstruovaná podlážka vázní komory pro snadné umytí
- Optoelektronický snímač pro kontinuální sledování vodorovného stavu s interaktivní funkcí pro bezchybné nastavení vodorovné polohy
- Přímý transfer dat do programů MS Office (MS Excel, MS Word), programovatelný interval automatického odesílání dat
- Možnost přiřadit váženému vzorku nezaměnitelný alfanumerický identifikační kód a vložit číslo šarže
- Mini USB port pro rychlý přenos dat do PC nebo na automaticky detekovatelnou standardní tiskárnu Sartorius YDP40
- Dokumentace odpovídá požadavkům protokolů podle GLP/GPM
- Tři konfigurovatelné úrovně zabezpečení, zámek proti krádeži, supervizorské přístupové heslo pro zabránění nežádoucí manipulace
- APC funkce (Advanced Pharma Compliance) pro sledování minimální hmotnosti vzorku podle USP a blokování přenosu dat na tiskárnu nebo PC v případě detekce nejistých výsledků vážení
- Prvotní ověření výrobcem (cejch) platné na území EU 2 roky, možnost následného ověření váhy u ČMI

**Technické parametry**

| Model                   | 125D - 1CEU        | 225D - 1CEU                   |
|-------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Doba stabilizace        | 6 s                | 6 s (60-120 g)<br>2 s (220 g) |
| Průměr misky            | 80 mm              | 80 mm                         |
| Světlá výška nad miskou | 218 mm             | 218 mm                        |
| Napájení                | 12-18 V DC adaptér | 12-18 V DC adaptér            |
| Rozměry (š x h x v)     | 214 x 316 x 376 mm | 214 x 316 x 376 mm            |
| Hmotnost                | 7,8 kg             | 7,8 kg                        |



Semimikrováha Secura®



Semimikrováha Secura®




Semimikrováha Secura®



Semimikrováha Secura®



Semimikrováha Secura®

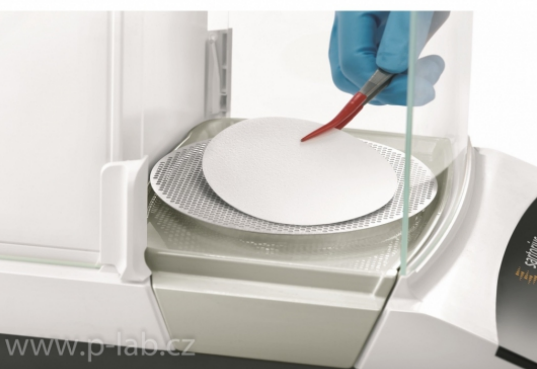

Semimikrováha Secura®

| Model    | Váživost (g)   | Rozlišení (mg)    | Reprodukovatelnost (mg) | Linearita (mg)  | Katalogové číslo |
|----------|----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|------------------|
| 125D - 1 | 60 / 120       | 0,01 / 0,01       | 0,02 / 0,04             | 0,1 / 0,1       | R.CNK4.1         |
| 225D - 1 | 60 / 120 / 220 | 0,01 / 0,01 / 0,1 | 0,02 / 0,04 / 0,07      | 0,1 / 0,1 / 0,2 | R.CNK5.1         |