

Stříkačka automatická dávkovací DOSYS | SOCOREX

Skleněná stříkačka s automatickým nasáváním pomocí pružiny na pístu pro opakované dávkování malých objemů

- Rychlé a přesné nastavení objemu, dokonale těsnící píst bez "O" kroužku
- Plastové držadlo, optimální vyvážení a ergonomické tvary
- Vysoká chemická odolnost, snadné rozebírání a čištění
- Vysoká přesnost a reprodukovatelnost nastaveného objemu
- Model s držadlem se dvěma otvory pro prsty nebo model s pistolovým držadlem

Technické parametry

Zakončení pro jehly a kanyly:

Luer lock

Objem (ml)	Přesnost při min.objemu	Přesnost při střed.objemu	Přesnost při max.objemu
0,025 - 0,3	< 1,8 %	< 1,2 %	< 0,5 %
0,1 - 0,5	< 1,2 %	< 0,9 %	< 0,4 %
0,1 - 1,0	< 0,7 %	< 0,6 %	< 0,4 %
0,3 - 2,0	< 0,6 %	< 0,5 %	< 0,4 %
0,5 - 5,0	< 0,5 %	< 0,4 %	< 0,2 %
1,0 - 10,0	< 0,5 %	< 0,4 %	< 0,2 %
5,0 - 20,0	< 0,5 %	< 0,4 %	< 0,4 %



Stříkačky DOSYS BASIC

Stříkačky bez třicestného ventilu pro jednorázové dávkování

Držadlo se dvěma otvory			Pistolové držadlo		
Rozsah (ml)	Dělení (ml)	Katalogové číslo	Rozsah (ml)	Dělení (ml)	Katalogové číslo
0,1 - 1,0	0,05	S162501	0,1 - 1,0	0,05	S172501
0,3 - 2,0	0,1	S162502	0,3 - 2,0	0,1	S172502
0,5 - 5,0	0,5	S162550	0,5 - 5,0	0,5	S172550

1,0 - 10,0	1,0		1,0 - 10,0	1,0	S172510
------------	-----	--	------------	-----	---------

Stříkačka se dodává s PVC ochranným krytem skleněného válce a návodem k použití.



Stříkačky DOSYS CLASSIC

Stříkačky s integrovaným třicestným výpustným a nasávacím ventilem pro automatické nasávání

Technické parametry

Délka silikonové nasávací trubičky:

1 m

Držadlo se dvěma otvory			Pistolové držadlo		
Rozsah (ml)	Dělení (ml)	Katalogové číslo	Rozsah (ml)	Dělení (ml)	Katalogové číslo
0,025 - 0,3	0,025	S163503	0,025 - 0,3	0,025	S183503
0,1 - 0,5	0,1	S163505	0,1 - 0,5	0,1	S183505
0,1 - 1,0	0,05	S163501	0,1 - 1,0	0,05	S183501
0,3 - 2,0	0,1	S163502	0,3 - 2,0	0,1	S183502
0,5 - 5,0	0,5	S163550	0,5 - 5,0	0,5	S183550
1,0 - 10,0	1,0	S163510	1,0 - 10,0	1,0	S183510
5,0 - 20,0	1,0		5,0 - 20,0	1,0	S183520

Stříkačka se dodává s nasávací silikonovou hadičkou zakončenou nerezovou nasávací kuličkou, PVC ochranným krytem skleněného válce, nasávací a dávkovací jehlou, sadou náhradních ventilových dílů a návodem k použití.



Stříkačka DOSYS CLASSIC

Stříkačky DOSYS PREMIUM

Stříkačky s odnímatelným třícestným výpustným a nasávacím ventilem pro automatické nasávání

Technické parametry

Délka silikonové nasávací trubičky:

1 m

Držadlo se dvěma otvory			Pistolové držadlo		
Rozsah (ml)	Dělení (ml)	Katalogové číslo	Rozsah (ml)	Dělení (ml)	Katalogové číslo
0,1 - 1,0	0,05	S164501	0,1 - 1,0	0,05	S174501
0,3 - 2,0	0,1	S164502	0,3 - 2,0	0,1	S174502
0,5 - 5,0	0,5	S164550	0,5 - 5,0	0,5	S174550
1,0 - 10,0	1,0	S164510	1,0 - 10,0	1,0	S174510

Stříkačka se dodává s nasávací silikonovou hadičkou zakončenou nerezovou nasávací kuličkou, PVC ochranným krytem skleněného válce, nasávací a dávkovací jehlou, sadou náhradních ventilových dílů a návodem k použití.



Příslušenství pro dávkovací stříkačky

Technické parametry

Materiál vícekanálových nástavců:

nerez ocel s PTFE uzávěry - lze autoklávovat

Materiál kartáčku:

nylon, plastové držadlo

Popis	Katalogové číslo
4kanálový nástavec	S170054
8kanálový nástavec	S170058
Držák pro lahvičku - kompletní set	S118710
Standardní odnímatelný třícestný ventil	S170950
Odsávací třícestný ventil (opačný chod)	S170952
Šroubovací víčko GL 45 pro odpadní láhev*	S170945
Kartáček na čištění skleněného válce stříkaček 0,3, 0,5 a 1 ml	S170301
Kartáček na čištění skleněného válce stříkaček 1, 2 a 5 ml	S170305
Kartáček na čištění skleněného válce stříkaček 5, 10 a 20 ml	S170320
Stojánek na stříkačku	S320170

* Ve víčku je olivka pro hadičku a vzduchový ventil.

Ke stříkačkám lze objednat náhradní skleněný válec a sadu náhradních ventilových dílů.




Odsávací třícestný ventil (opačný chod)



Stojánek na stříkačku



Stojánek na stříkačku

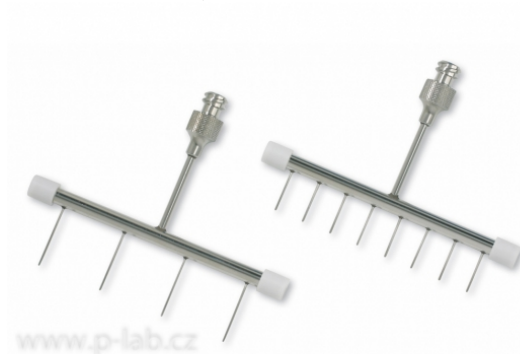

4 a 8kanálový nástavec