

Ultrazvuková lázeň ELMASONIC EASY 50 R | ELMA

Válcová ultrazvuková lázeň optimalizovaná pro laboratorní použití

- LED displej a dotyková klávesnice pro natavení všech parametrů
- Čtyři automatické programy se speciálně definovanými ultrazvukovými režimy pro laboratorní použití
- Program běžného čištění - zajišťuje rovnoměrnější rozložení zvukových vln v lázni pro mechanické čištění
- Program pro "přípravu vzorků" s pulzním režimem pro standardní aplikace jako je míchání, rozpouštění, dispergování a čištění předmětů
- Program pro čištění analytických sít se zvýšenou intenzitou ultrazvuku
- "DEGAS" program pro rychlé a spolehlivé odplynování HPLC rozpouštědel v 1 litrových lahvích
- Akustický a optický signál na konci čištění, bezpečnostní vypnutí po 8 hodinách nečinnosti nebo při krátkodobém přerušení napájení
- Automatické vypnutí při teplotě lázně vyšší než 90°C
- Plastové víko lze po obrácení použít jako odkapávací misku na vkládací košík

Technické parametry

Objem vany:	6 l
Pracovní objem:	3,0 - 5,0 l
Vnitřní rozměry vany (průměr x hloubka):	240 x 140 mm
Frekvence:	37 kHz
Nastavitelný časový spínač:	1 - 30 min, nebo kontinuálně (max 6 hod)
Materiál vany a vnějšího pláště:	nerez ocel, plastová držadla
Topný výkon:	bez topení
Příkon:	150 W
Napájení:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Krytí :	IP 20
Rozměry (š x d x v):	345 x 295 x 345 mm
Hmotnost:	5,0 kg



Ultrazvuková lázeň ELMASONIC Easy 50 R

Popis	Katalogové číslo
ELMASONIC Easy 50 R	E104543

Ultrazvukovou lázeň ELMASONIC Easy 50 R dodáváme včetně plastového víka

Příslušenství

- Víko s otvorem v kombinaci s gumovým těsněním pro 600 ml nízkou nebo 1 000 ml vysokou kádinku (gumové těsnění nutno objednávat samostatně)

Technické parametry

Materiál víka:	modře probarvený PP
Průměr otvoru ve víku s otvorem:	97 mm
Vnitřní rozměry vkladacího košíku:	průměr 220 mm, hloubka 70 mm

Popis	Katalogové číslo
Plastové víko	E104608
Plastové víko s otvorem o průměru 97 mm	R.YE63.1
Gumové těsnění pro víko s otvorem	R.YE64.1
Vkládací košík pro lázeň Easy 50 R	E104606
Vkládací držák sít	E104974




Plastové víko



Plastové víko s otvorem



Vkládací košík

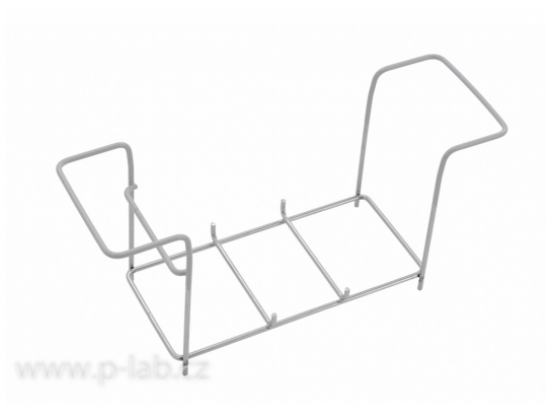

Vkládací držák sít